

إدارة الدواء الوريدي: المرن

قبل الاستعمال

- تفحص ملصق الدواء للحصول على تعليمات بخصوص وقت إزالة الدواء من الثلاجة
- لا تسرع عملية التسخين بتسخين الدواء أو تسخينه في الميكروويف
- استخدم منطقة عمل نظيفة
- نظف يديك جيداً باستخدام الصابون والماء الدافئ على الأقل 20 ثانية (في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول)
- جفف يديك بمنشفة نظيفة

لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن المشورة المهنية. على هذا النحو، يرجى اتباع توصيات طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي.

1 | اجمع المستلزمات وقم بإعداد حصىرة SASH وفقاً للتعليمات:

- أ. حصىرة SASH (انظر الشكل 1)
- ب. كرة الدواء الوريدي
- ج. حقن تدفق المحلول الملحي
- د. حقنة تدفق الهيبارين (عند الطلب)
- هـ. مناديل مبللة بالكحول
- و. حاوية الأدوات الحادة و/أو حاوية القمامة




2 | افحص كرة الدواء

افحص الملصق على الكرة (انظر الشكل 2) وتحقق من:

- أ. الاسم الصحيح للمريض
- ب. الاسم الصحيح للدواء
- ج. حجم/كمية الدواء
- د. الوقت اللازم لتدفئة الدواء لدرجة حرارة الغرفة
- هـ. "الاستخدام حسب التاريخ" الخاص بالدواء

يجب أن تكون كرة الدواء خالية من الشقوق أو التسريبات أو الجزيئات العائمة أو تغير اللون. اتصل بممرضتك أو الصيدلي إذا كنت تواجه مشكلات مع كرة الدواء أو كان أي شيء على الملصق غير صحيحاً.

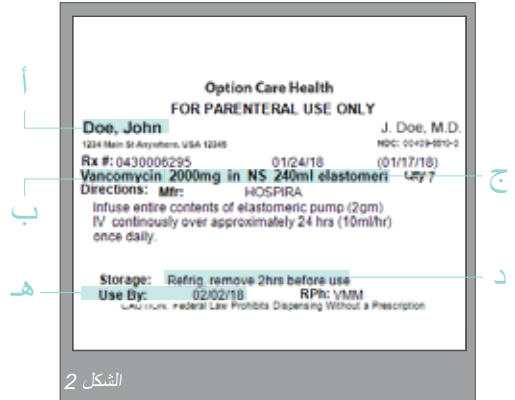

لأغراض العرض التوضيحي، اتبع التعليمات الموجودة على كرة الدواء الخاصة بك.



3 | شطف الخط الوريدي بمحلول ملحي

- أ. افرك الموصل الخالي من الإبرة على قسطرة وريدية بمنديل كحولي لمدة **15 ثانية** على الأقل واتركه يجف في الهواء. (انظر الشكل 3)
- ب. ادفع مكبس حقنة المحلول الملحي لكسر الختم.
- ج. أزل الغطاء الواقي من حقنة تدفق المحلول الملحي.
لا تلمس طرف الحقنة بعد إزالة الغطاء.

تخلص من حقنة تدفق المحلول الملحي إذا لامس طرفها المعقم أي سطح غير نظيف.



الشكل 3



الشكل 4

- د. امسك الحقنة في وضع مستقيم وادفع المكبس برفق لإزالة الهواء من الحقنة.
- هـ. أرفق حقنة تدفق المحلول الملحي بموصل خالي من الإبرة على القسطرة الوريدية باستخدام حركة الدفع واللف في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تأمينهما معًا. (انظر الشكل 4)
- و. افتح المشبك على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدية.
- ز. اشطف القسطرة الوريدية باستخدام طريقة "push/pause" (الدفع/الإيقاف المؤقت). للقيام بذلك، ادفع كمية صغيرة من السائل، ثم توقف لمدة **2-3 ثوانٍ** وكرر ذلك حتى يتم ضخ الكمية الموصوفة.

لا تحاول الشطف إذا تم استيفاء المقاومة؛ اتصل بالمرض أو الصيدلي.

- ح. افتح المشبك على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدية.
- ط. أزل حقنة تدفق المحلول الملحي وتخلص منها في حاوية القمامة بعد الاستخدام.

4 | إدارة الدواء

- أ. افرك الموصل الخالي من الإبرة على قسطرة وريدية بمنديل كحولي لمدة **15 ثانية** على الأقل واتركه يجف في الهواء. (انظر الشكل 3)
- ب. أزل الغطاء الواقي من أنبوب الدواء. (انظر الشكل 5)
- ج. أرفق حقنة الدواء بإحكام بالموصل الخالي من الإبرة على القسطرة الوريدية. استخدم حركة الدفع واللف في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تأمينها. (انظر الشكل 6)
- د. افتح المشبك الموجود على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدية.
- هـ. افتح المشبك الموجود على أنبوب الدواء.
- و. إذا تطلبت الشركة المصنعة للجهاز وجود لصقًا على الجلد، فاستخدم الشريط اللاصق الذي قدمته، وتأكد من أن مُقيد التدفق مُلصق مباشرة على بشرتك. لا تقم بتغطية المرشح بأي شريط أو مادة. (انظر الشكل 7 في الصفحة التالية)

قد تختلف إرشادات الشركة المصنعة.



الشكل 5



الشكل 6



4 | إدارة الدواء... يُتبع...

- ز. عندما تكون كرة الدواء فارغة (مفرغة من الهواء)، أغلق المشبك الموجود على أنبوب الدواء.
- ح. افصل أنبوب الدواء عن الموصل الخالي من الإبرة على القسطرة الوريدية.
- ط. افتح المشبك الموجود على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدي.
- ق. تخلص من الكرة حسب التعليمات.

إذا لم تجد أي تفرغ للجهاز بعد ٣٠ دقيقة، فيرجى التحقق للتأكد من فتح جميع المشابك. إذا لم ينجح ذلك، فاتصل بالمرضى أو الصيدلي.



الشكل 7

5 | شطف الخط الوريدي بمحلول ملحي

- أ. افرك الموصل الخالي من الإبرة على قسطرة وريدية بمنديل كحولي لمدة 15 ثانية على الأقل واتركه يجف في الهواء. (انظر الشكل 3)
- ب. ادفع مكبس حقنة المحلول الملحي لكسر الختم.
- ج. أزل الغطاء الواقي من حقنة تدفق المحلول الملحي.
- لا تلمس طرف الحقنة بعد إزالة الغطاء.

تخلص من حقنة تدفق المحلول الملحي إذا لامس طرفها المعقم أي سطح غير نظيف.

- د. امسك الحقنة في وضع مستقيم وادفع المكبس برفق لإزالة الهواء من الحقنة.
- هـ. أرفق حقنة تدفق المحلول الملحي بموصل خالي من الإبرة على القسطرة الوريدية باستخدام حركة الدفع واللف في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تأمينهما معًا. (انظر الشكل 4)
- و. افتح المشبك الموجود على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدي.
- ز. اشطف القسطرة الوريدية باستخدام طريقة "push/pause" (الدفع/الإيقاف المؤقت). للقيام بذلك، ادفع كمية صغيرة من السائل، ثم توقف لمدة 2-3 ثوانٍ وكرر ذلك حتى يتم ضخ الكمية الموصوفة.

لا تحاول الشطف إذا تم استيفاء المقاومة؛ اتصل بالمرضى أو الصيدلي.

- ح. افتح المشبك على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدية.
- ط. أزل حقنة تدفق المحلول الملحي وتخلص منها في حاوية القمامة بعد الاستخدام.



6 | شطف الخط الوريدي بمحلول ملحي (إذا تم الطلب)

- أ. افرك الموصل الخالي من الإبرة على قسطرة وريدية بمندبل كحولي لمدة 15 ثانية على الأقل واتركه يجف في الهواء. (انظر الشكل 3)
- ب. ادفع مكبس حقنة المحلول الملحي لكسر الختم.
- ج. أزل الغطاء الواقي من حقنة تدفق الهيبارين.
لا تلمس طرف الحقنة بعد إزالة الغطاء.

تخلص من حقنة تدفق الهيبارين إذا لامس طرفها المعقم أي سطح غير نظيف.

- د. امسك الحقنة في وضع مستقيم وادفع المكبس برفق لإزالة الهواء من الحقنة.
- هـ. أرفق حقنة تدفق الهيبارين بموصل خالٍ من الإبرة على القسطرة الوريدية باستخدام حركة الدفع واللف في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تأمينهما معًا. (انظر الشكل 4)
- و. افتح المشبك على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدية.
- ز. اشطف القسطرة الوريدية باستخدام طريقة "push/pause" (الدفع/الإيقاف المؤقت). للقيام بذلك، ادفع كمية صغيرة من السائل، ثم توقف لمدة 2-3 ثوانٍ وكرر ذلك حتى يتم ضخ الكمية الموصوفة.

لا تحاول الشطف إذا تم استيفاء المقاومة؛ اتصل بالمرضى أو الصيدلي.

- ح. افتح المشبك على القسطرة الوريدية و/أو مجموعة التمديد الوريدية.
- ط. أزل حقنة تدفق الهيبارين وتخلص منها في حاوية القمامة بعد الاستخدام.

اتصل بممرضتك أو طبيبك وتحدث معهم حول أي أسئلة أو مخاوف

يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحًا عند الاتصال به على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا في السنة لمساعدتك.



لعرض إرشادات الفيديو والوصول إلى موارد تعليمية إضافية، قم بزيارة [optioncarehealth.com/education](https://www.optioncarehealth.com/education).