

静脉药物施用： 弹性体


本信息不旨在
替代专业建议。
因此，请遵照您的医生、
护士或药剂师的建议。

使用前

- 请查阅药物标签的说明，了解何时从冰箱取出药物
- 切勿以加热或微波方式加速药物回温过程
- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 20 秒
(如果没有肥皂和水，请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 按指示准备用品并准备 SASH 垫：


- A. SASH 垫 (参阅图 1)
- B. 静脉注射药物球
- C. (2) 个生理盐水冲洗注射器
- D. (1) 个肝素冲洗注射器 (如有医嘱)
- E. 酒精湿巾
- F. 锐器盒和/或垃圾桶

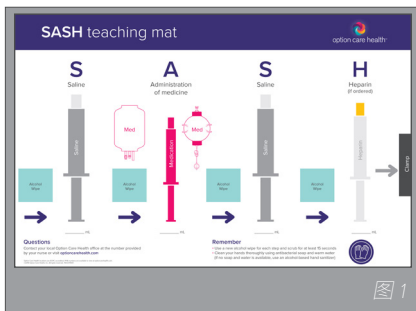

2 | 检查药物球

查看球的标签 (参阅图 2) 并确认：


- A. 患者姓名正确
- B. 药物名称正确
- C. 药物容量/数量
- D. 药物回到室温需要的时间
- E. 药物的“弃置日期”

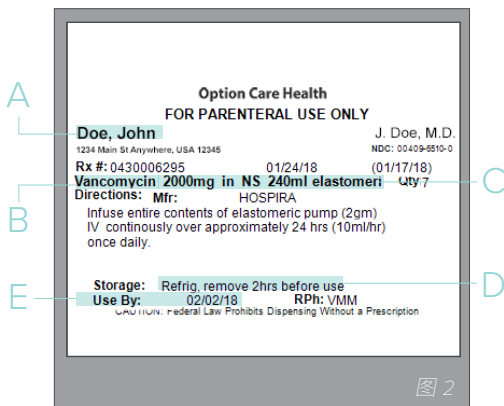

为便于演示，请遵照您的药物球上的说明。

药物球应没有裂缝、泄漏、悬浮颗粒或变色。

如果药物球有问题或标签的任何内容不正确，请致电您的护士或药剂师。

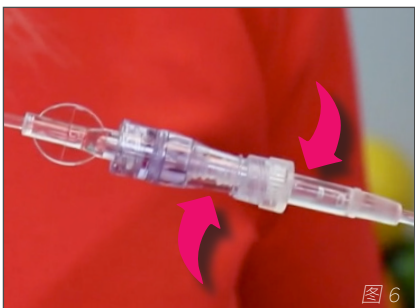

3 | 用生理盐水冲洗静脉输液管

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
(参阅图 3)
- B. 推动生理盐水冲洗注射器的柱塞以打破密封。
- C. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。
请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果生理盐水冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。
- E. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 4)
- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- I. 取下用后的生理盐水冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

4 | 药物施用

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
(参阅图 3)
- B. 取下给药输液管的保护帽。(参阅图 5)
- C. 将药物输液管牢固连接到静脉导管的无针接头。推入后顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 6)
- D. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- E. 打开给药输液管的夹具。
- F. 如果设备制造商要求用胶带贴到皮肤，请利用提供的胶带，并确保限流器直接贴在皮肤。请勿用任何胶带或材料覆盖过滤器。(参阅下页图 7)

制造商指导准则可能有所不同。



图 7

4 | 药物施用 续...

- G. 药物球排空后（已泄气），关闭给药输液管的夹具。
- H. 从静脉导管的无针接头拆下给药输液管。
- I. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- J. 按指示弃置药物球。

如果器械没有在 30 分钟后干瘪，请进行检查，确保所有夹具均已打开。
如果未成功，请联系您的护士或药剂师。

5 | 用生理盐水冲洗静脉输液管

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
(参阅图 3)
- B. 推动生理盐水冲洗注射器的柱塞以打破密封。
- C. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。
请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果生理盐水冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。
- E. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 4)
- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- I. 取下用后的生理盐水冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。



6 | 用肝素冲洗静脉输液管（如有医嘱）

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
(参阅图 3)
- B. 推动肝素冲洗注射器的柱塞以打破密封。
- C. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。
请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果肝素冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。
- E. 把肝素冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。*(参阅图 4)*
- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- I. 取下用后的肝素冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

如有任何疑问或疑虑，请致电您的护士或医生

您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命为您效劳。



想要观看教学视频并获取额外教育资源，
请访问 optioncarehealth.com/education。