

静脉药物施用：

连接小药瓶的小药包（使用流速控制器）

本信息不旨在
替代专业建议。
因此，请遵照您的医生、
护士或药剂师的建议。

使用前

- 如果药物在冷藏中，请查阅药物标签的说明，了解何时从冰箱取出药物
- 切勿以加热或微波方式加速药物回温过程
- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 20 秒
(如果没有肥皂和水，请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 按指示准备用品并准备 SASH 垫：

- A. SASH 垫 (参阅图 1)
- B. 静脉注射药物袋
- C. 静脉输液管 (可能需要使用 24 小时)
- D. 静脉输液架
- E. (2) 个生理盐水冲洗注射器
- F. (1) 个肝素冲洗注射器 (如有医嘱)
- G. 酒精湿巾
- H. 锐器盒和/或垃圾桶

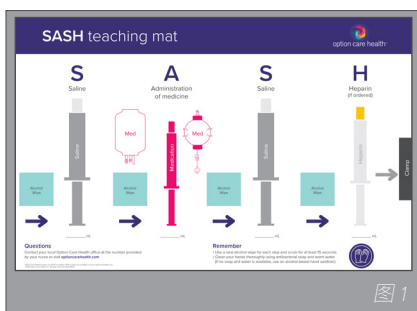


图 1

2 | 检查药物袋

查看袋子的标签 (参阅图 2) 并确认：

- A. 患者姓名正确
- B. 药物名称正确
- C. 药物容量/数量
- D. 储存说明
- E. 药物的“弃置日期”



图 2

为便于演示，请遵照您的药物袋上的说明。

药物袋应没有泄漏、悬浮颗粒或变色。如果药物袋有问题或标签的任何内容不正确，请致电您的护士或药剂师。

静脉药物施用： 连接小药瓶的小药包（使用流速控制器）




3 | 准备静脉注射药物

- 上下弯折浅蓝色小帽，释放小药瓶的压力。（参阅图 3）
- 握住药物袋，小药瓶在下。
- 将溶液挤入小药瓶至半满。
- 轻柔混合溶液以溶解药物。
- 握住药物袋，小药瓶倒置。（参阅图 4）
- 挤压药物袋，使空气排进小药瓶。
- 松手，让混合的药物从小药瓶排出。

重复这些步骤，直到小药瓶倒空药物和溶液。
确保药物完全溶解。请勿取下小药瓶。

4 | 准备静脉输液管

- 从包装内取出静脉输液管。
- 关闭静脉输液管的夹具。
- 将药物袋放在干净平坦的表面。
- 取下药物袋封口。（参阅图 5）
- 取下输液管穿刺头的护套。（参阅图 6）
请勿触碰输液管末端。
- 将输液管末端推入并拧进药物袋，进而插入袋子。（参阅图 7）
确保穿刺头接触到袋子里的药物，但小心不要刺破袋子。（参阅图 8）
- 将静脉输液管转盘拨到“OPEN”（打开）。（参阅图 9）
- 慢慢打开夹具，向输液管填充药物。
- 当药物到达输液管末端时，关闭夹具。
- 设定正确的输液速度，将静脉输液管转盘调整到药物标签列出的速度。

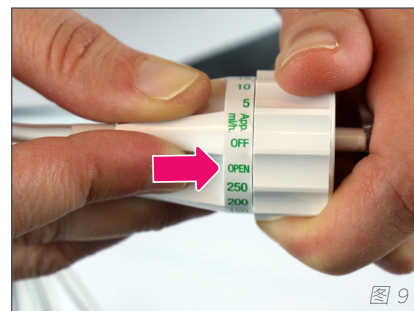

静脉药物施用： 连接小药瓶的小药包（使用流速控制器）



图 10



图 11

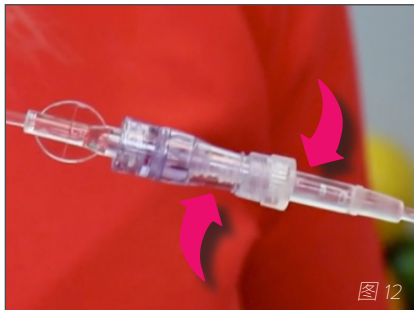


图 12

5 | 用生理盐水冲洗静脉输液管

- 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
(参阅图 10)
- 推动生理盐水冲洗注射器的柱塞以打破密封。
- 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。
请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果生理盐水冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。
- 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 11)
- 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- 取下用后的生理盐水冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

6 | 药物施用

- 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
(参阅图 10)
- 取下静脉输液管的保护帽。
- 将药物输液管牢固连接到静脉导管的无针接头。推入后顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 12)
- 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- 打开给药输液管的夹具。
- 输注剂量后，关闭静脉输液管的夹具。
- 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

静脉药物施用： 连接小药瓶的小药包（使用流速控制器）

6 | 药物施用 续...

- H. 从导管拔下静脉输液管。
- I. 将所有设备弃置到垃圾桶。

如果将在 24 小时内再次使用输液管，请使用提供的无菌帽盖上暴露的静脉输液管头。

7 | 用生理盐水冲洗静脉输液管

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 15 秒，然后晾干。
(参阅图 10)
- B. 推动生理盐水冲洗注射器的柱塞以打破密封。
- C. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。
请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果生理盐水冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。
- E. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 11)
- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 2 至 3 秒，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- I. 取下用后的生理盐水冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

静脉药物施用： 连接小药瓶的小药包（使用流速控制器）



8 | 用肝素冲洗静脉输液管（如有医嘱）

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。
（参阅图 10）
- B. 推动肝素冲洗注射器的柱塞以打破密封。
- C. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。
请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果肝素冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。
- E. 把肝素冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。*（参阅图 11）*
- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- I. 取下用后的肝素冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

如有任何疑问或疑虑，请致电您的护士或医生

您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命为您效劳。



想要观看教学视频并获取额外教育资源，
请访问 optioncarehealth.com/education。

Option Care Health 各分址均经过 ACHC 认可。HHA 号码可以在 optioncarehealth.com 查看。
©2022 Option Care Health, Inc. 保留所有权利。20OCH11012-0422