

# 肠内营养施用： Joey 泵（EZ 模式）

请参阅“患者肠内营养指南”手册，了解额外信息。

本信息旨在替代专业建议。

请遵照医生、护士、药剂师或营养师给您的治疗建议。

这些说明旨在为您提供施用肠内营养的基础步骤。

请参阅您的 Joey 泵快速参考指南，了解更详细的说明。



## 准备开始

- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 **20 秒**  
(如果没有肥皂和水, 请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

## 1 | 准备居家管饲

- A. 收集您的配方食物和用品, 放在清洁的工作区域。(参阅图 1)
- B. 确认配方食物盒上的到期日, 确保配方食物名称跟医嘱相符。用干净的抹布擦拭顶部, 开封前摇匀。

打开的配方食物盒应立即盖上并冷藏。  
产品不应在袋中悬挂超过 12 小时  
(如果使用的是重组粉末, 则不应在袋中悬挂超过 4 小时)。  
在 24 小时内或根据制造商的建议使用或弃置已打开的配方食物。

- C. 在腿上放一条毛巾, 因为在施用过程中配方食物可能会溢出。
- D. 坐直或者将床头抬起至少 30 至 45 度。**请勿**在管饲期间和之后至少一小时平躺。

## 2 | 施用管饲

- A. 竖直持握饲袋, 打开盖子, 填充规定的配方食物量, 然后牢固盖上盖帽。(参阅图 2)
- B. 按下右下角的电源键开启泵。(参阅图 3)
- C. 按下相应的菜单选择按钮 ▶ (在“KEEP SETTINGS” (保持设定) 旁边) 或 ▶ “CLEAR SETTINGS” (清除设定) 以执行需要的操作。

日常操作请选择“KEEP SETTINGS” (保持设定)。

- D. 按照图示在泵盖子下装入饲袋。(参阅图 4) 关闭盖子, 从输液管的末端取下透明塑料套。(参阅图 5)

# 肠内营养施用：Joey 泵（EZ 模式）



图 3

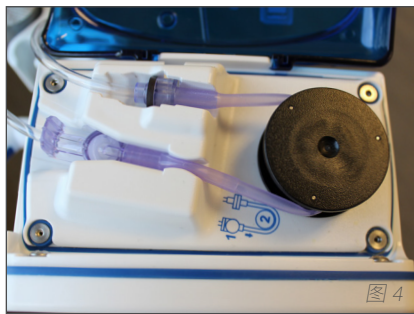


图 4

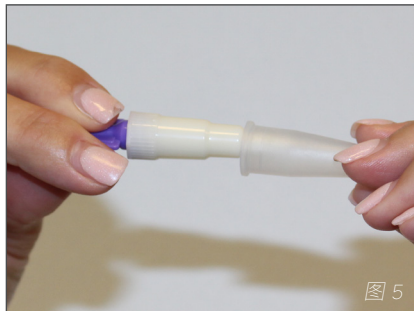


图 5



图 6

- E. 按下 ▶ “PRIME PUMP”（灌注泵）以访问泵灌注选项，然后按下 ▶ “AUTO PRIME”（自动灌注）以自动灌注饲袋。
- F. 按下 ▶ “HOLD TO PRIME FEED”（按住以灌食），手动将配方食物输送到管子末端，然后按下 ▶ “DONE”（完成）。
- G. 选择 ▶ “ADJUST FEED”（调整喂饲），再选择 ▶ “FEED RATE”（喂饲速度），使用左侧的按钮设定需要的速度。设定好速度后选择 ▶ “ENTER”（输入）。
- H. 如果饲管有夹具，那么在打开饲管的末端之前，请确保夹具处于关闭状态。如果饲管没有夹具，那么在打开末端之前用手指捏住饲管。
- I. 打开饲管帽，打开管子夹具，用水慢慢冲洗饲管。（参阅图 6）
- J. 将饲袋末端与饲管连接。选择 ▶ “RUN”（运行）。
- K. 喂饲完成后，断开饲袋的连接，使用注射器用水慢慢冲洗饲管。
- L. 盖上饲管末端，并关闭管子夹具。
- M. 按下电源按钮关闭泵。
- N. 在喂饲间隔期，使用温水彻底冲洗饲袋。

每 24 小时使用一个饲袋。

## 喂饲时间表

配方食物名称：	
目标量/天：	
目标速度：	
间隔/频率：	
额外备注：	

## 施用水冲洗

施用水冲洗是为了给患者充分补水，并防止输液管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用温水缓慢冲洗饲管。
- 喂饲前用 \_\_\_\_\_ mL 水冲洗，喂饲后用 \_\_\_\_\_ mL 水冲洗
- 每天用额外 \_\_\_\_\_ mL 水冲洗

切勿过度用力冲洗饲管。

## 确保成功的提示

- **请勿**在胃部不适或呕吐时进行管饲。
- 如果有饱腹的不舒服感觉，请减慢喂饲速度，或等待一小时后再进行喂饲。
- **请勿**向输液管注入配方食物或水以外的任何东西，除非医疗保健提供者有明确的指示。

如有任何疑问或疑虑，  
请致电您的护士或医生



您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命  
为您效劳。

想要观看教学视频并获取额外教育资源，  
请访问 [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education)。