


肠内营养施用： Infinity 泵

请参阅“患者肠内营养指南”手册，了解额外信息。

本信息不旨在替代专业建议。请遵照医生、护士、药剂师或营养师给您的治疗建议。

这些说明旨在为您提供施用肠内营养的基础步骤。请参阅您的 Infinity 泵快速参考指南，了解更详细的说明。

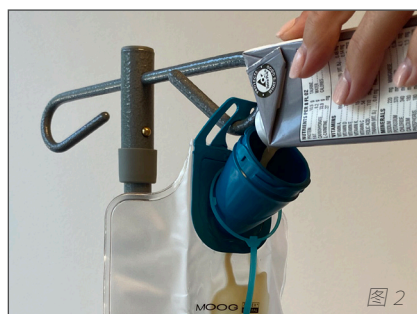

准备开始

- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 **20 秒**
(如果没有肥皂和水，请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 准备居家管饲

- A. 收集您的配方食物和用品，放在清洁的工作区域。(参阅图 1)
- B. 确认配方食物盒上的到期日，确保配方食物名称跟医嘱相符。用干净的抹布擦拭顶部，开封前摇匀。

打开的配方食物盒应立即盖上并冷藏。
产品不应在袋中悬挂超过 **12 小时**
(如果使用的是重组粉末，则不应在袋中悬挂超过 4 小时)。
在 24 小时内或根据制造商的建议使用或弃置已打开的配方食物。




- C. 在腿上放一条毛巾，因为在施用过程中配方食物可能会溢出。
- D. 坐直或者将床头抬起至少 30 至 45 度。**请勿**在管饲期间和之后至少一小时平躺。

2 | 施用管饲

- A. 竖直持握饲袋，打开盖子，填充规定的配方食物量，然后牢固盖上盖帽。(参阅图 2)
- B. 按住“ON/OFF”（开/关）键 1.5 秒开启泵。(参阅图 3)
- C. 按下“RATE/DOSE”（速度/剂量）键显示“RATE”（速度），使用“+”和“-”键设定需要的速度。速度是指每小时输送的容量。
- D. 按下“RATE/DOSE”（速度/剂量）键显示“DOSE”（剂量），使用“+”和“-”键设定需要的剂量。剂量是指总容量。

成年人可以将此设定为无限 (INF)，以免除设定具体剂量的麻烦。
不建议为小儿患者设定无限剂量。

肠内营养施用：Infinity 泵

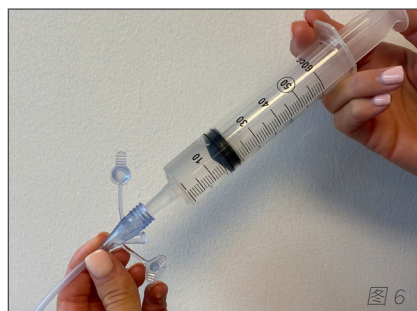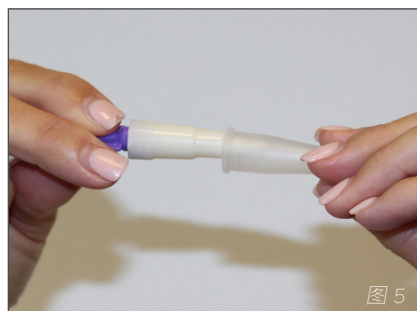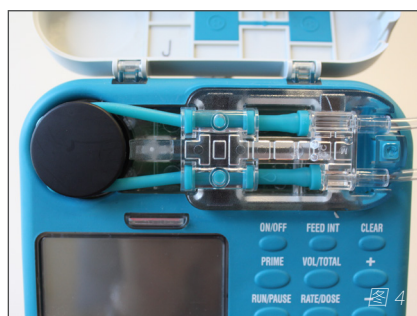

- E. 将蓝绿色管子缠绕泵轮并轻轻拉伸 (参阅图 4)，然后闭合盖子，即连接了饲袋。从管子末端取下透明塑料套。(参阅图 5)
- F. 按住“PRIME”（灌注）键开始灌注管子。当配方食物到达管子末端时松开按钮。若手动灌注，请将袋子倒置，轻轻挤压袋子。同时，轻捏管子的◇符号以排出空气，并让配方食物流经管子。
- G. 如果饲管有夹具，那么在打开饲管的末端之前，请确保夹具处于关闭状态。如果饲管没有夹具，那么在打开末端之前用手指捏住饲管。
- H. 打开饲管帽，打开管子夹具，用水慢慢冲洗饲管。(参阅图 6)
- I. 将饲袋末端与饲管连接。按下“RUN/PAUSE”（运行/暂停）键开始喂饲。
- J. 喂饲完成后，断开饲袋的连接，使用注射器用水慢慢冲洗饲管。
- K. 盖上饲管末端，并关闭管子夹具。
- L. 按住“ON/OFF”（开/关）键 1.5 秒关闭泵。
- M. 在喂饲间隔期，使用温水彻底冲洗饲袋。

每 24 小时使用一个饲袋。

喂饲时间表

配方食物名称:	
目标量/天:	
目标速度:	
间隔/频率:	
额外备注:	

施用水冲洗

施用水冲洗是为了给患者充分补水，并防止输液管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用温水缓慢冲洗饲管。
- 喂饲前用 _____ mL 水冲洗，喂饲后用 _____ mL 水冲洗
- 每天用额外 _____ mL 水冲洗

切勿过度用力冲洗饲管。

确保成功的提示

- **请勿**在胃部不适或呕吐时进行管饲。
- 如果有饱腹的不舒服感觉，请减慢喂饲速度，或等待一小时后再进行喂饲。
- **请勿**向输液管注入配方食物或水以外的任何东西，除非医疗保健提供者有明确的指示。

如有任何疑问或疑虑，
请致电您的护士或医生



您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命
为您效劳。

想要观看教学视频并获取额外教育资源，
请访问 optioncarehealth.com/education。