


肠内营养施用： 重力 - 仅应急使用

请参阅“患者肠内
营养指南”手册，
了解额外信息。

本信息不旨在替代专业建议。
请遵照医生、护士、药剂师或
营养师给您的治疗建议。

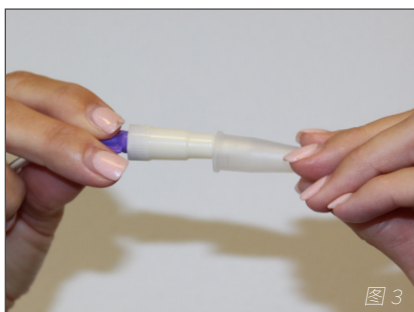

您的肠内营养饲泵的内置电池应能持续供电 12 至 18 小时，具体取决于喂饲的速度和持续时间。

尽可能保持电池满电并节约使用电池。在长时间停电或泵发生故障时，请遵照这些指示进行重力喂饲。请始终将重力套件随其他应急用品一起存放。

请在停电并且无法给泵充电时使用重力袋。
如果您没有应急重力饲袋或需要补换袋子，请联系您本地的 Option Care Health 办公室。


准备开始

- 收集您的配方食物和用品，放在清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 **20 秒**
(如果没有肥皂和水，请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

应急重力喂饲步骤

1. 按照指示用水慢慢冲洗饲管。(参阅图 1)
2. 确保重力袋管子的滚轮夹处于“关”或下的位置。
3. 将重力袋挂在静脉输液架，打开盖子，装入指定量的配方食物。
(参阅图 2) 盖紧盖子，从管子末端取下透明塑料套。(参阅图 3)
4. 缓慢地将滚轮夹打开到“开”或上的位置，让配方食物流经管子，直至到达末端以灌注管子，然后再次关闭滚轮夹。
5. 将重力袋的末端连接到饲管，缓慢地将滚轮夹打开到“开”或上的位置。

肠内营养施用：重力 - 仅应急使用

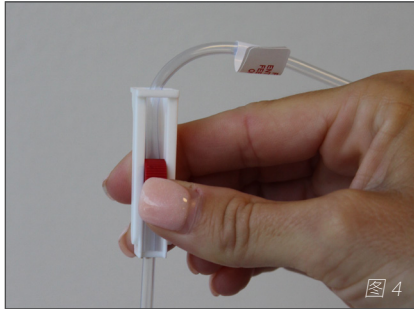

6. 想要控制喂饲的流量，请向上或向下调整滚轮夹的位置。(参阅图 4)
7. 喂饲完成后，断开重力袋的连接，按指示使用注射器用水慢慢冲洗饲管。
8. 在喂饲间隔期，使用温水彻底冲洗重力袋。重力袋通常在 24 小时后弃置。

对于小儿患者或警觉性降低的成人患者，照护者一定要密切监控重力喂饲，确保喂饲速度不能太快。

如有任何疑问或疑虑，
请致电您的护士或医生



您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命
为您效劳。

想要观看教学视频并获取额外教育资源，
请访问 optioncarehealth.com/education。

Option Care Health 各分址均经过 ACHC 认可。HHA 号码可以在 optioncarehealth.com 查看。
©2021 Option Care Health, Inc. 保留所有权利。20OCH11024