

# 施用 IV 靜脈輸注藥物： 連接小藥瓶的小藥包（使用重力）

本資訊目的  
非取代專業建議。  
因此，請遵照醫師、  
護士或藥劑師的建議。

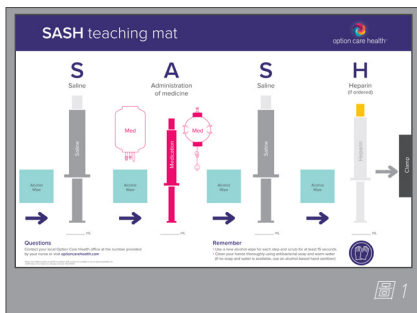


圖 1

## 使用前

- 使用清潔的工作區域
- 使用肥皂和溫水徹底清潔雙手至少 20 秒  
(如果沒有肥皂和水，請使用含酒精的手部滅菌劑)
- 用乾淨的毛巾擦乾雙手

## 1 | 按指示準備用品並準備 SASH 墊：

- A. SASH 墊 (參閱圖 1)
- B. IV 靜脈輸注藥袋
- C. IV 靜脈輸注管 (可能需要使用 24 小時)
- D. IV 靜脈輸注架
- E. (2) 個生理鹽水沖洗注射器
- F. (1) 個肝素沖洗注射器 (如有醫囑)
- G. 酒精擦拭布
- H. 尖銳物品容器和/或垃圾桶

## 2 | 檢查藥袋

查看袋子的標籤 (參閱圖 2) 並核實：

- A. 患者姓名正確
- B. 藥物名稱正確
- C. 藥物容量/數量
- D. 儲存說明
- E. 藥物的「棄置日期」

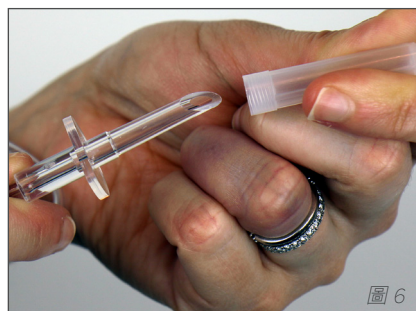


圖 2

為便於示範，請遵照您的藥袋說明。

藥袋應沒有漏洩、懸浮顆粒或變色。如果藥袋有問題或標籤的任何內容不正確，請致電您的護士或藥劑師。

# 施用 IV 靜脈輸注藥物： 連接小藥瓶的小藥包（使用重力）



## 3 | 準備 IV 靜脈輸注藥物

- 上下彎折淺藍色蓋子，釋放小藥瓶的壓力。(參閱圖 3)
- 握住藥袋，小藥瓶在下。
- 將溶液擠入小藥瓶至半滿。
- 輕輕混合溶液以溶解藥物。
- 握住藥袋，小藥瓶倒置。(參閱圖 4)
- 擠壓藥袋，讓空氣排進小藥瓶。
- 鬆手，讓混合的藥物從小藥瓶排出。


重複上述步驟，直到小藥瓶的藥物和溶液完全清空。  
確保藥物完全溶解。請勿取下小藥瓶。

## 4 | 準備 IV 靜脈輸注管

- 從包裝取出 IV 靜脈輸注管。
- 關閉 IV 靜脈輸注管的夾子。
- 將藥袋放在乾淨平坦的表面。
- 撕下藥袋封口。(參閱圖 5)
- 取下輸注管尖端蓋。(參閱圖 6)  
請勿觸碰輸注管末端。
- 將輸注管末端旋轉推入並刺穿藥袋。(參閱圖 7)  
確保尖端接觸到袋中藥物，但小心不要刺破袋子。(參閱圖 8)
- 將 IV 靜脈輸注藥袋掛在 IV 靜脈輸注架上。輕壓滴室，直至液體半滿。請勿填裝過滿。(參閱圖 9)
- 慢慢打開夾子，讓藥物流入輸注管。
- 當藥物到達輸注管末端時，關閉夾子。



# 施用 IV 靜脈輸注藥物： 連接小藥瓶的小藥包（使用重力）

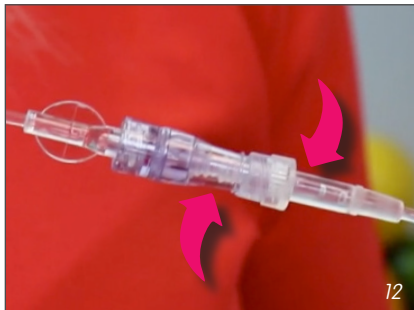

## 5 | 用生理鹽水沖洗 IV 靜脈輸注管

- 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。（參閱圖 10）
- 推動生理鹽水沖洗注射器的柱塞以打開封口。
- 取下生理鹽水沖洗注射器的保護蓋。  
請勿在取下蓋子後觸碰注射器頭。

如果生理鹽水沖洗注射器的無菌頭在未蓋蓋子的情況觸碰任何不乾淨的表面，請棄置此注射器。

- 豎起注射器，輕推柱塞以排出注射器的空氣。
- 把生理鹽水沖洗注射器接上 IV 靜脈輸注導管的無針接頭，再順時針扭轉，直至牢固連接。（參閱圖 11）
- 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- 使用「間歇」法沖洗 IV 靜脈輸注導管。方法如下：請推少量液體，暫停 2 至 3 秒，然後重複至輸注完規定的量。

如遇阻力請勿強行沖洗；請致電護士或藥劑師。

- 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- 取下用完的生理鹽水沖洗注射器，並棄置於垃圾桶。

## 6 | 施用藥物

- 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。（參閱圖 10）
- 取下 IV 靜脈輸注管的保護蓋。
- 將藥物輸注管牢固連接到 IV 靜脈輸注導管的無針接頭。推入後順時針扭轉，直至牢固連接。（參閱圖 12）
- 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。  
*（在藥物開始輸注時，會看到液體滴入滴室。  
滴速是每 15 秒 \_\_\_\_ 滴。根據需要用夾子調整滴速。）*
- 打開給藥輸注管的夾子。
- 在輸注劑量後，關閉 IV 靜脈輸注管的夾子。
- 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。

# 施用 IV 靜脈輸注藥物： 連接小藥瓶的小藥包（使用重力）

## 6 | 施用藥物 續...

- H. 從導管拔下 IV 靜脈輸注管。
- I. 將所有設備棄置於垃圾桶。

如果 24 小時內會再次使用輸注管，  
請利用提供的無菌保護蓋來蓋住 IV 靜脈輸注管露出的尖端。

## 7 | 用生理鹽水沖洗 IV 靜脈輸注管

- A. 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。（參閱圖 10）
- B. 推動生理鹽水沖洗注射器的柱塞以打開封口。
- C. 取下生理鹽水沖洗注射器的保護蓋。  
請勿在取下蓋子後觸碰注射器頭。

如果生理鹽水沖洗注射器的無菌頭在未蓋蓋子的情況觸碰任何不乾淨的表面，  
請棄置此注射器。

- D. 豎起注射器，輕推柱塞以排出注射器的空氣。
- E. 把生理鹽水沖洗注射器接上 IV 靜脈輸注導管的無針接頭，再順時針扭轉，直至牢固連接。（參閱圖 11）
- F. 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- G. 使用「間歇」法沖洗 IV 靜脈輸注導管。方法如下：請推少量液體，暫停 2 至 3 秒，然後重複至輸注完規定的量。

如遇阻力請勿強行沖洗；請致電護士或藥劑師。

- H. 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- I. 取下用完的生理鹽水沖洗注射器，並棄置於垃圾桶。



# 施用 IV 靜脈輸注藥物： 連接小藥瓶的小藥包（使用重力）

## 8 | 用肝素沖洗 IV 靜脈輸注管（如有醫囑）

- A. 用酒精擦拭布擦拭 IV 靜脈輸注導管的無針接頭至少 15 秒，然後風乾。（參閱圖 10）
- B. 推動肝素沖洗注射器的柱塞以打開封口。
- C. 取下肝素沖洗注射器的保護蓋。  
請勿在取下蓋子後觸碰注射器頭。

如果肝素沖洗注射器的無菌頭在未蓋蓋子的情況觸碰任何不乾淨的表面，請棄置此注射器。

- D. 豎起注射器，輕推柱塞以排出注射器的空氣。
- E. 把肝素沖洗注射器接上 IV 靜脈輸注導管的無針接頭，再順時針扭轉，直至牢固連接。（參閱圖 11）
- F. 打開 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- G. 使用「間歇」法沖洗 IV 靜脈輸注導管。方法如下：請推少量液體，暫停 2 至 3 秒，然後重複至輸注完規定的量。

如遇阻力請勿強行沖洗；請致電護士或藥劑師。

- H. 關閉 IV 靜脈輸注導管和/或 IV 靜脈輸注延長裝置的夾子。
- I. 取下用完的肝素沖洗注射器，並棄置於垃圾桶。

## 如有任何疑問或疑慮，請致電您的護士或醫師

您的 Option Care Health 團隊全年無休隨時待命為您效勞。



想要觀看教學影片並獲取其他教育資源，  
請造訪 [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education)。

Option Care Health 各分址均經過 ACHC 認可。如欲查看 HHA 號碼，請造訪 [optioncarehealth.com](https://optioncarehealth.com)。  
©2022 Option Care Health, Inc. 保留所有權利。20OCH11011-0422



option care health®