

施用腸內營養： Joey 泵

請參閱「患者腸內
營養指南」手冊，
瞭解其他資訊。

本資訊目的不在取代專業建議。
請遵照醫師、護士、藥劑師或
營養師給您的治療建議。

以下說明旨在向您提供施用
腸內營養的基礎步驟。
請參閱您的 Joey 泵快速參考指南，
瞭解更詳細的說明。



準備開始

- 使用清潔的工作區域
- 使用肥皂和溫水徹底清潔雙手至少 **20 秒**
(如果沒有肥皂和水，請使用含酒精的手部滅菌劑)
- 用乾淨的毛巾擦乾雙手

1 | 準備居家管飼

- A. 準備您的配方食物和用品，放在乾淨的工作區域。(參閱圖 1)
- B. 確認配方食物盒的到期日，確保配方食物名稱跟您的醫囑相符。
用乾淨的布擦拭頂部，開封前搖勻。

打開的配方食物盒應立即蓋上並冷藏。
產品不應掛在飼袋超過 12 小時 (如果使用的是重組粉末，則不應掛在袋中超過 4 小時)。
在 24 小時內或根據製造商的建議使用或棄置已打開的配方食物。

- C. 放一條毛巾在腿上，因為在施用過程配方食物可能會溢出。
- D. 坐直或者抬起床頭至少 30 至 45 度。在管飼期間和之後至少一小時
請勿平躺。

2 | 施用管飼

- A. 豎直持握飼袋，打開蓋子，填充規定的配方食物量，然後關緊蓋子。(參閱圖 2)
- B. 按下右下角的電源鍵開啟泵。(參閱圖 3)
- C. 按下相應的功能表選擇按鈕 ▶ (在「KEEP SETTINGS」(保持設定) 旁邊) 或 ▶ 「CLEAR SETTINGS」(清除設定) 以執行需要的動作。

日常操作請選擇「KEEP SETTINGS」(保持設定)。

- D. 按照圖示在泵蓋子下裝入飼袋。
(參閱圖 4) 關閉蓋子，從輸注管末端取下透明塑膠套。(參閱圖 5)



圖 3

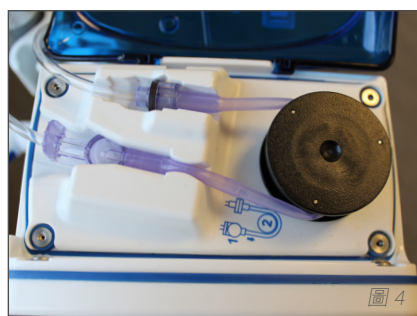


圖 4

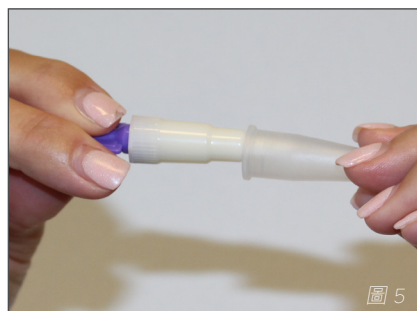


圖 5

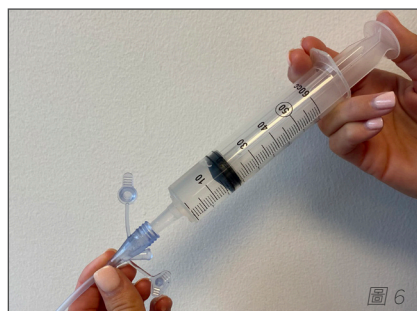


圖 6

- E. 按下 ▶ 「PRIME PUMP」 (灌注泵) 以存取泵灌注選項，然後按下 ▶ 「AUTO PRIME」 (自動灌注) 以自動灌注飼袋。
- F. 按下 ▶ 「HOLD TO PRIME FEED」 (按住以灌食)，手動將配方食物輸送到管子末端，然後按下 ▶ 「DONE」 (完成)。
- G. 選擇 ▶ 「ADJUST FEED」 (調整餵飼)，再選擇 ▶ 「FEED RATE」 (餵飼速度)，使用左側按鈕設定需要的速度。設定好速度後選擇 ▶ 「ENTER」 (輸入)。
- H. 選擇 ▶ 「FEED VTBD」 (待餵飼量)，使用左側按鈕設定將要輸送的容量。設定好容量後選擇 ▶ 「ENTER」 (輸入)。
- I. 如果飼管有夾子，那麼在打開飼管的末端之前，請確保夾子處於關閉狀態。如果飼管沒有夾子，那麼在打開末端之前用手指捏住飼管。
- J. 打開飼管蓋，打開管夾，用水慢慢沖洗飼管。(參閱圖 6)
- K. 把飼管接上重力袋末端。選擇 ▶ 「RUN」 (運轉)。
- L. 一旦餵飼完成，取下飼袋，使用注射器用水慢慢沖洗飼管。
- M. 蓋上飼管末端，並關閉管夾。
- N. 按下電源按鈕關閉泵。
- O. 在兩次餵飼之間，使用溫水徹底沖洗飼袋。

每 24 小時使用一個飼袋。

餵飼時間表

配方食物名稱：	
目標量/天：	
目標速度：	
間隔/頻率：	
其他備註：	

施用水沖洗

施用水沖洗是為了讓患者充分補水，並防止輸注管堵塞。

- 使用 60 mL 的注射器用溫水緩慢沖洗飼管。
- 餵飼前用 _____ mL 水沖洗，餵飼後用 _____ mL 水沖洗
- 每天額外以 _____ mL 水沖洗

切勿過度用力沖洗飼管。

確保成功的提示

- 在胃部不適或嘔吐時，**請勿**進行管飼。
- 如果有飽腹的不舒服感覺，請減慢餵飼速度，或等待一小時後再進行餵飼。
- **請勿**在飼管內注入配方食物或水以外的任何東西，除非醫療照護提供者有明確指示。

如有任何疑問或疑慮，
請致電您的護士或醫師



您的 Option Care Health 團隊全年無休隨時待命
為您效勞。

想要觀看教學影片並獲取其他教育資源，
請造訪 optioncarehealth.com/education。