


# Administração de medicamento via IV: Elastomérico

Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Portanto, siga as recomendações de seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

## Antes de usar

- Consulte o rótulo do medicamento para obter instruções sobre quando removê-lo do refrigerador
- **NUNCA** acelere o processo de aquecimento esquentando o medicamento no fogão ou micro-ondas
- Use uma área de trabalho limpa
- Lave bem as mãos com sabão e água morna por, pelo menos, **20 SEGUNDOS**  
*(se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)*
- Seque as mãos com uma toalha limpa

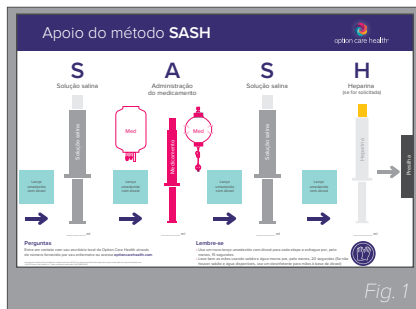

## 1 | Reúna os suprimentos e prepare o método SASH conforme as instruções:


- A. Método SASH (Veja a Fig. 1)
- B. Balão de medicamento IV
- C. (2) Seringas com solução salina
- D. (1) Seringas com heparina (se solicitado)
- E. Lenços umedecidos com álcool
- F. Recipiente para materiais perfurocortantes e/ou recipiente de descarte

## 2 | Inspeção o balão de medicamento

Confira a etiqueta do balão (Veja a Fig. 2) e verifique:

- A. Nome correto do paciente
- B. Nome correto do medicamento
- C. Volume/quantidade do medicamento
- D. Tempo necessário para aquecer o medicamento em temperatura ambiente
- E. “Data de validade” do medicamento

O balão de medicamento não deve conter rachaduras, vazamentos, partículas flutuantes ou descoloração. Entre em contato seu enfermeiro ou farmacêutico se houver problemas com o balão de medicamento ou se alguma coisa no rótulo estiver incorreta.

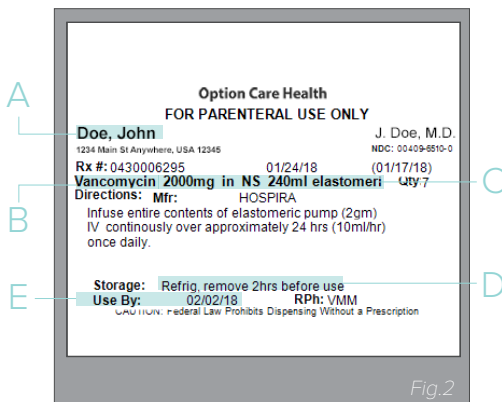

Para fins de demonstração, siga as instruções no seu SEU balão de medicamento.



## 3 | Enxágue a linha IV com solução salina


- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. (Veja a Fig. 3)
- B. Empurre o êmbolo da seringa com solução salina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solução salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com solução salina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. (Veja a Fig. 4)
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Chame um enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com solução salina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

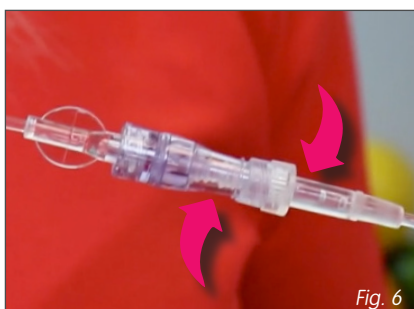

## 4 | Administração de medicamento

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. (Veja a Fig. 3)
- B. Remova a tampa protetora do tubo de medicamento. (Veja a Fig. 5)
- C. Fixe firmemente o cateter do medicamento ao tubo sem agulha no cateter IV. Use o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fique preso. (Veja a Fig. 6)
- D. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- E. Abra a presilha do tubo de medicamento.
- F. Se o fabricante do dispositivo exigir que se prenda com fita adesiva na pele, use a fita adesiva fornecida, certificando-se de que o limitador de fluxo seja colado diretamente na sua pele. Não cubra o filtro com qualquer fita ou material. (Veja a Fig. 7 na página seguinte)

As instruções do fabricante podem ser diferentes.



## 4 | Administração de medicamento *Continuação...*

- G. Quando o balão de medicamento estiver vazio (desinflado), feche a presilha no tubo de medicamento.
- H. Desconecte o tubo de medicamento do conector sem agulha no cateter intravenoso.
- I. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- J. Descarte o balão conforme as instruções.

Se, após 30 minutos, você não observar qualquer esvaziamento do dispositivo, verifique se todos as presilhas estão abertas. Se isso não funcionar, entre em contato com seu enfermeiro ou farmacêutico.

## 5 | Enxágue a linha IV com solução salina

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 3)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com solução salina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solução salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com solução salina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 4)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Chame um enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com solução salina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.



## 6 | Enxágue a linha IV com heparina (se solicitado)

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 3)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com heparina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com heparina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com heparina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com heparina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 4)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência.  
Chame um enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com heparina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

## Ligue para seu enfermeiro ou médico caso tenha alguma dúvida ou preocupação

Sua equipe da Option Care Health está disponível em tempo integral para ajudar você



Para visualizar as instruções em vídeo e acessar recursos educacionais adicionais, acesse [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education).

As unidades da Option Care Health são credenciadas pela ACHC. Os números da HHA estão disponíveis para visualização em [optioncarehealth.com](https://optioncarehealth.com).

©2022 Option Care Health, Inc. Todos os direitos reservados. 200CH11008-0422



option care health®