

# Administração de medicamento via IV:

## Minibolsa com ampola anexada usando a gravidade


Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Portanto, siga as recomendações de seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

### Antes de usar

- Use uma área de trabalho limpa
- Lave bem as mãos com sabão e água morna por, pelo menos, **20 SEGUNDOS**  
*(se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)*
- Seque as mãos com uma toalha limpa

## 1 | Reúna os suprimentos e prepare o método SASH conforme as instruções:

- A. Método SASH (Veja a Fig. 1)
- B. Bolsa de medicamento IV
- C. Tubo IV *(pode ser usado por 24 horas)*
- D. Suporte para IV
- E. (2) Seringas com solução salina
- F. (1) Seringa com heparina *(se solicitado)*
- G. Lenços umedecidos com álcool
- H. Recipiente para materiais perfurocortantes e/ou recipiente de descarte

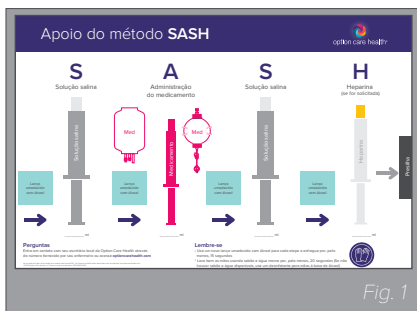


## 2 | Inspeção a bolsa de medicamento

Confira a etiqueta na bolsa *(Veja a Fig. 2)* e verifique:


- A. Nome correto do paciente
- B. Nome correto do medicamento
- C. Volume/quantidade do medicamento
- D. Instruções de armazenamento
- E. “Data de validade” do medicamento

A bolsa de medicamento não deve conter vazamentos, partículas flutuantes ou descoloração. Entre em contato seu enfermeiro ou farmacêutico se houver problemas com a bolsa de medicamento ou se alguma coisa no rótulo estiver incorreta.

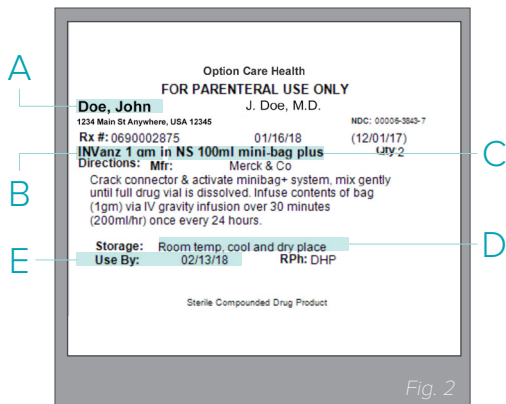

Para fins de demonstração, siga as instruções na sua SUA bolsa de medicamentos.

# Administração de medicamento via IV: Minibolsa com ampola anexada usando a gravidade

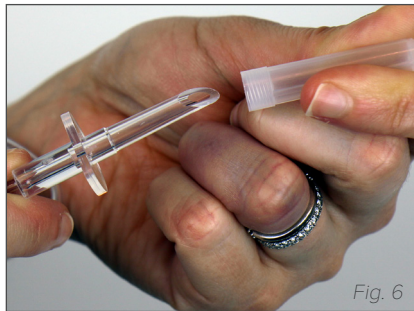


## 3 | Prepare o medicamento IV

- Dobre para cima e depois para baixo para liberar a pressão da ampola do medicamento com tampa azul claro. (Veja a Fig. 3)
- Segure a bolsa do medicamento com a ampola para baixo.
- Esprema a solução na ampola até ficar cheio pela metade.
- Misture suavemente a solução para dissolver o medicamento.
- Segure a bolsa do medicamento com a ampola de cabeça para baixo. (Veja a Fig. 4)
- Aperte a bolsa para forçar o ar a entrar na ampola.
- Solte para drenar o medicamento misturado da ampola.


Repita essas etapas até que a ampola esteja completamente vazia de medicamento e solução. Garanta que o medicamento seja completamente dissolvido. **NÃO** remova a ampola do medicamento.

## 4 | Prepare o tubo IV

- Remova o tubo IV da embalagem.
- Feche a presilha no tubo IV.
- Coloque a bolsa de medicamento em uma superfície plana e limpa.
- Remova a aba da bolsa de medicamento. (Veja a Fig. 5)
- Remova a cobertura da ponta do tubo. (Veja a Fig. 6)  
**NÃO** toque na ponta do tubo.
- Espete a bolsa empurrando e torcendo a extremidade do tubo para dentro da bolsa. (Veja a Fig. 7) Certifique-se de que a ponta alcance o medicamento na bolsa, tendo cuidado para não perfurar a bolsa. (Veja a Fig. 8)
- Pendure o recipiente do medicamento IV no suporte para IV. Aperte suavemente a câmara de gotejamento até ficar cheia de líquido até a metade. **NÃO** encha demais. (Veja a Fig. 9)
- Abra a presilha lentamente, enchendo o tubo com medicamento.
- Quando o medicamento atingir o fim do tubo, feche a presilha

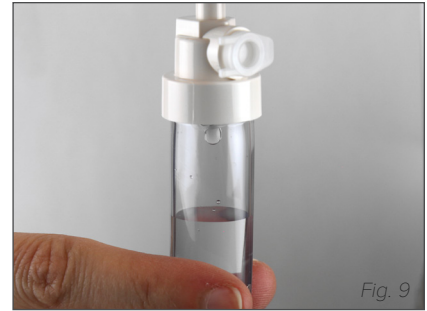

# Administração de medicamento via IV: Minibolsa com ampola anexada usando a gravidade

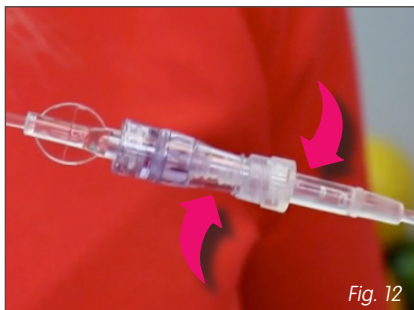

## 5 | Enxágue a linha IV com solução salina

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. (Veja a Fig. 10)
- B. Empurre o êmbolo da seringa com solução salina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solução salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com solução salina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. (Veja a Fig. 11)
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência.  
Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com solução salina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

## 6 | Administração de medicamento

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. (Veja a Fig. 10)
- B. Remova a tampa protetora do tubo IV.
- C. Fixe firmemente o cateter do medicamento ao tubo sem agulha no cateter IV. Use o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fique preso. (Veja a Fig. 12)
- D. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.  
*(As gotas devem ser vistas caindo na câmara de gotejamento à medida que o medicamento começa a ser infundido. A taxa de gotejamento é de \_\_\_ gotas a cada 15 segundos. Ajuste a taxa usando a presilha conforme necessário.)*
- E. Abra a presilha do tubo de medicamento.
- F. Após a infusão da dose, feche a presilha do tubo IV.
- G. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.



### 6 | Administração de medicamento *Continuação...*

- H. Desconecte o tubo IV do cateter.
- I. Descarte todos os equipamentos no recipiente de descarte

Se o tubo for usado novamente dentro de 24 horas, cubra a ponta exposta do tubo IV com a tampa esterilizada fornecida.

### 7 | Enxágue a linha IV com solução salina

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 10)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com solução salina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com solução salina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com solução salina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com solução salina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 11)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “**injetar/parar**”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência.  
Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com solução salina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

# Administração de medicamento via IV:

## Minibolsa com ampola anexada usando a gravidade



### 8 | Enxágue a linha IV com heparina (se solicitado)

- A. Limpe o conector sem agulha do cateter IV com um lenço com álcool por, pelo menos, **15 SEGUNDOS** e deixe secar sozinho. *(Veja a Fig. 10)*
- B. Empurre o êmbolo da seringa com heparina para romper o lacre.
- C. Remova a tampa protetora da seringa com heparina. **NÃO** toque na ponta da seringa depois de remover a tampa.

Descarte a seringa com heparina se a ponta estéril estiver sem tampa e tocar uma superfície suja.

- D. Segure a seringa na vertical e empurre suavemente o êmbolo para remover o ar da seringa.
- E. Fixe a seringa com heparina ao conector sem agulha no cateter IV usando o movimento de empurrar e girar no sentido horário até que fiquem presos juntos. *(Veja a Fig. 11)*
- F. Abra a presilha do cateter IV e/ou do conjunto de extensão IV.
- G. Enxágue o cateter IV usando o método “injetar/parar”. Para isso, injete uma pequena quantidade de fluido, pare por **2-3 SEGUNDOS** e repita até que a quantidade prescrita seja aplicada.

**NÃO** tente fazer a lavagem se encontrar resistência. Ligue para o seu enfermeiro ou farmacêutico

- H. Feche a presilha do cateter IV e/ou conjunto de extensão IV.
- I. Remova a seringa com heparina e descarte-a no recipiente de descarte após o uso.

## Ligue para seu enfermeiro ou médico caso tenha alguma dúvida ou preocupação

Sua equipe da Option Care Health está disponível em tempo integral para ajudar você



Para visualizar as instruções em vídeo e acessar recursos educacionais adicionais, acesse [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education).

As unidades da Option Care Health são credenciadas pela ACHC. Os números da HHA estão disponíveis para visualização em [optioncarehealth.com](https://optioncarehealth.com).

©2022 Option Care Health, Inc. Todos os direitos reservados. 200CH11011-0422



option care health®