

# Administração de nutrição enteral: Bomba Joey (modo EZ)

Consulte o folheto “Guia do paciente para nutrição enteral” para obter informações adicionais.

*Essas informações não substituem o aconselhamento profissional. Siga as recomendações de seu médico, enfermeiro, farmacêutico ou nutricionista a respeito de sua terapia.*

*O objetivo destas instruções é fornecer-lhe as etapas básicas para administrar sua nutrição enteral. Consulte o guia de consulta rápida da sua Bomba Joey para obter instruções mais detalhadas.*



## Introdução

- Use uma área de trabalho limpa
- Lave bem as mãos com sabão e água morna por, pelo menos, **20 segundos** (se não tiver água e sabão disponíveis, use um desinfetante para mãos a base de álcool)
- Seque suas mãos com uma toalha limpa

## 1 | Prepare a alimentação por sonda doméstica

- A. Reúna sua fórmula e suprimentos, colocando na área de trabalho limpa. (Veja a Fig. 1)
- B. Verifique a data de validade na caixa da fórmula e verifique se o nome corresponde ao seu pedido. Limpe a parte superior com um pano limpo e agite bem antes de abrir.

As caixas de fórmula abertas devem ser imediatamente tampadas e refrigeradas. O produto não deve ser ficar na bolsa de alimentação por mais de 12 horas (se for utilizado um pó reconstituído, não deve ficar na bolsa por mais de 4 horas). Use ou descarte qualquer fórmula aberta dentro de 24 horas ou conforme as recomendações do fabricante.

- C. Coloque uma toalha em seu colo, pois a fórmula pode derramar durante a administração.
- D. Sente-se em posição ereta ou eleve a cabeça de sua cama a, pelo menos, 30-45 graus. **NÃO** se deite durante a alimentação e por, pelo menos, uma hora depois.

## 2 | Administre a alimentação por sonda

- A. Segurando a bolsa de alimentação na vertical, abra a tampa e encha com a quantidade de fórmula solicitada, fechando a tampa com segurança em seguida. (Veja a Fig. 2)
- B. Ligue a bomba pressionando o botão de ligar no canto inferior direito. (Veja a Fig. 3)
- C. Pressione o botão de seleção do menu correspondente ► ao lado de “KEEP SETTINGS” (MANTER CONFIGURAÇÕES) ou ► “CLEAR SETTINGS” (LIMPAR CONFIGURAÇÕES) para realizar a ação desejada.

Selecione ‘KEEP SETTINGS’ (MANTER CONFIGURAÇÕES) para a operação de rotina.

- D. Encha a bolsa de alimentação conforme o diagrama abaixo da porta da bomba. (Veja a Fig. 4) Feche a porta e remova a tampa plástica transparente da extremidade da sonda. (Veja a Fig. 5)

# Administração de nutrição enteral: Bomba Joey (modo EZ)



Fig. 3

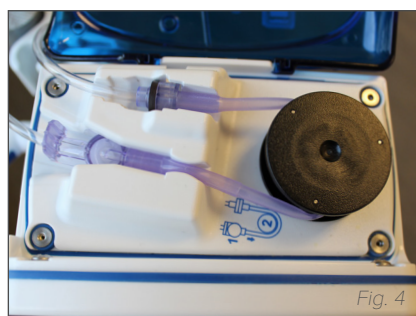


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

- E. Pressione ► **“PRIME PUMP”** (PREPARAR BOMBA) para acessar as opções de preparação da bomba e, em seguida, pressione ► **“AUTO PRIME”** (PREPARAÇÃO AUTOMÁTICA) para preparar automaticamente a bolsa de alimentação.
- F. Pressione ► **“HOLD TO PRIME FEED”** (ESPERAR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO) para levar manualmente a fórmula até o final da sonda e depois pressione ► **“DONE” (PRONTO)**.
- G. Selecione ► **“ADJUST FEED”** (AJUSTAR ALIMENTAÇÃO), em seguida, ► **“FEED RATE”** (TAXA DE ALIMENTAÇÃO) e use os botões à esquerda para programar a taxa desejada. Selecione ► **“ENTER”** quando a taxa for definida.
- H. Se sua sonda de alimentação tiver presilha, certifique-se de esteja na posição fechada antes de abrir a extremidade da sua sonda de alimentação. Se sua sonda não tiver uma presilha, aperte-a antes de abrir a extremidade.
- I. Abra sua tampa da sonda de alimentação, abra a presilha do tubo e lave a sonda de alimentação lentamente com água. (Veja a Fig. 6)
- J. Conecte a extremidade da bolsa de alimentação à sua sonda de alimentação. Selecione ► **“RUN” (EXECUTAR)**.
- K. Ao terminar a alimentação, desconecte a bolsa de alimentação e use a seringa para lavar lentamente a sonda de alimentação com água.
- L. Feche a extremidade da sonda de alimentação e feche a presilha do tubo.
- M. Pressione o botão de energia para desligar a bomba.
- N. Enxágue bem a bolsa de alimentação com água morna entre as alimentações.

Use uma bolsa de alimentação a cada 24 horas.

Cronograma de alimentação	
Nome(s) da fórmula:	
Quantidade alvo/ dia:	
Taxa alvo:	
Intervalo/ frequência:	
<b>Observações adicionais:</b>	



## Administração de lavagens com água

As lavagens com água são administradas para proporcionar hidratação adequada e para evitar entupimento da sonda.

- Use uma seringa de 60 ml para lavar lentamente a sonda de alimentação com água morna
- Enxágue com \_\_\_\_\_ ml de água antes e \_\_\_\_\_ ml de água após a alimentação
- Enxágue com mais \_\_\_\_\_ ml de água a cada dia

Nunca use força excessiva para lavar seu tubo.

## Dicas para obter sucesso

- **NÃO** faça a alimentação por sonda caso sinta desconforto estomacal ou esteja vomitando.
- Se você desenvolver uma sensação desconfortável de barriga cheia, desacelere a alimentação ou espere uma hora antes de administrar mais alimentação.
- **NÃO** coloque nada além de fórmula ou água na sonda, a menos que seja especificamente instruído por seu prestador de serviços de saúde.

Ligue para seu enfermeiro ou médico caso tenha alguma dúvida ou preocupação



Sua equipe da Option Care Health está disponível em tempo integral para ajudar você

Para visualizar as instruções em vídeo e acessar recursos educacionais adicionais, acesse [optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education).

As unidades da Option Care Health são credenciadas pela ACHC. Os números da HHA estão disponíveis para visualização em [optioncarehealth.com](https://optioncarehealth.com).

©2021 Option Care Health, Inc. Todos os direitos reservados. 20OCH1022



option care health®