

# Как набирать лекарственный препарат в шприц

Дополнительную информацию см. в буклете «Руководство по инфузионной терапии для пациентов».

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций. Всегда выполняйте рекомендации своего врача, медсестры или фармацевта.

## Обзор

Вам нужно будет набирать лекарственный препарат из флакона и добавлять его в пакет с раствором для в/в введения.

### Вам нужно будет набирать:

- Лекарственный препарат: \_\_\_\_\_  
Количество: \_\_\_\_\_мл
- Лекарственный препарат: \_\_\_\_\_  
Количество: \_\_\_\_\_мл

## С чего начать

- Подготовьте чистое рабочее место.
- Тщательно вымойте руки, используя антибактериальное мыло и теплую воду (если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

## Подготовьте необходимые принадлежности

- A. Флакон(-ы)/ампула(-ы) с лекарственным препаратом.
- B. Шприцы с иглами.
- C. Иглы с фильтром (при наборе из ампулы).
- D. Спиртовые салфетки.
- E. Контейнер для острых предметов.
- F. Другое \_\_\_\_\_.

## Как набирать лекарственный препарат в шприц из флакона

1. | Извлеките шприц из упаковки.
  2. | Снимите пластиковый колпачок с флакона с лекарственным препаратом.
- Внешний вид флакона может отличаться от показанного на рисунке и будет зависеть от лекарственного препарата.
3. | Протрите верх флакона с лекарственным препаратом спиртовой салфеткой в течение не менее **15 СЕКУНД** и дайте ему высохнуть на воздухе.
  4. | Оттяните шток поршня на себя, чтобы набрать \_\_\_\_\_ мл воздуха.
  5. | Снимите колпачок с иглы. Введите иглу во флакон с лекарственным препаратом (строго вертикально, не под углом). Выпустите воздух во флакон с лекарственным препаратом (см. рис. 1).
  6. | Переверните флакон вверх дном. Отрегулируйте положение иглы так, чтобы кончик находился в жидкости. Наберите в шприц нужное количество жидкости. Еще раз проверьте количество набранного лекарственного препарата (см. рис. 2).

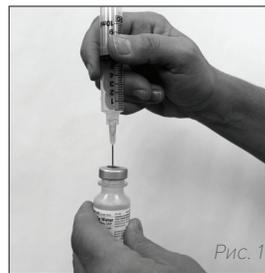


Рис. 1



Рис. 2

7. | Извлеките шприц из флакона и осторожно закройте иглу колпачком.
8. | Выпустите излишек воздуха и жидкости так, чтобы осталось указанное количество лекарственного препарата.
9. | Введите лекарственный препарат в пакет с раствором для в/в введения в соответствии с указаниями вашей медсестры.
10. | Утилизируйте использованные принадлежности в соответствии с указаниями.

## Как набирать лекарственный препарат в шприц из ампулы

1. | Закручивающими движениями присоедините к шприцу иглу с фильтром. **НЕ** прикасайтесь к кончику иглы или шприца.
2. | Удерживая ампулу в вертикальном положении, постучите пальцем по ее кончику, чтобы удалить из него раствор (см. рис. 3).
3. | Протрите горлышко ампулы спиртовой салфеткой.
4. | Оберните горлышко ампулы спиртовой салфеткой и возьмитесь за кончик ампулы большим и указательным пальцами. Другой рукой возьмитесь за нижнюю часть ампулы (см. рис. 4).



Рис. 3



Рис. 4

5. | Быстрым движением руки от себя отломите кончик ампулы. Если сделать это легко не удастся, немножко поверните ампулу по кругу и повторите попытку.
6. | Отложите отломленный кончик ампулы вместе с салфеткой в сторону (или поместите в контейнер для острых предметов).
7. | Удерживайте ампулу, наклонив ее под углом приблизительно 20 градусов.
8. | Вставьте иглу с фильтром в ампулу так, чтобы не дотрагиваться до края слома горлышка ампулы.

9. | Поместите кончик иглы на дно ампулы, при этом скошенный край должен быть снизу. Это поможет вам гарантированно вытянуть через иглу весь лекарственный препарат из ампулы (см. рис. 5).



Рис. 5

10. | Извлеките раствор, удерживая кончик иглы в жидкости.
11. | Извлеките иглу из ампулы и осторожно наденьте колпачок на иглу с фильтром.
12. | Отсоедините иглу с фильтром и выбросьте ее вместе с пустой ампулой в контейнер для острых предметов.
13. | Присоедините к наполненному шприцу обычную иглу, не дотрагиваясь до его кончика.
14. | Выпустите излишек воздуха и жидкости так, чтобы осталось указанное количество лекарственного препарата.
15. | Введите лекарственный препарат в пакет с раствором для в/в введения в соответствии с указаниями вашей медсестры.
16. | Утилизируйте использованные принадлежности в соответствии с указаниями.