

Введение энтерального питания: гравитационный метод (только в случае чрезвычайной ситуации)

Дополнительную информацию см. в буклете «Руководство по энтеральному питанию для пациентов».

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций. Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, медсестры, фармацевта или диетолога в отношении вашей терапии.



Рис. 1



Рис. 2

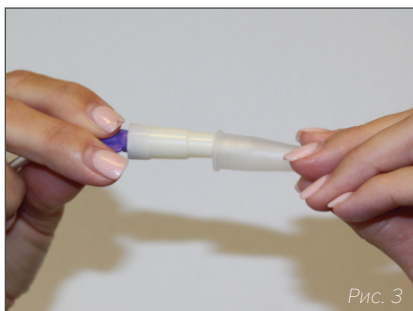


Рис. 3

Заряда внутренней батареи насоса для энтерального питания должно хватать на 12–18 часов, в зависимости от скорости и продолжительности введения питания.

Следите за тем, чтобы батарея была полностью заряжена, и по возможности экономьте заряд батареи. В случае продолжительного отключения электроэнергии или неисправности насоса выполняйте следующие инструкции по гравитационному методу введения питания. Всегда храните принадлежности для введения питания гравитационным методом в том же месте, что и принадлежности для использования в чрезвычайной ситуации.

Используйте пакеты для введения питания гравитационным методом, когда отключена электроэнергия или нет возможности зарядить насос. Если у вас нет пакета для введения питания гравитационным методом или вам нужно заменить его, обратитесь в местное отделение Option Care Health.


С чего начать

- Подготовьте смесь и принадлежности, разместив их на чистом рабочем месте.
- Тщательно вымойте руки теплой водой и мылом в течение **20 секунд** (если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

Введение питания гравитационным методом в чрезвычайной ситуации

1. Медленно промойте зонд водой в соответствии с полученными инструкциями (см. рис. 1).
2. Убедитесь, что роликовый зажим на трубке системы для введения питания гравитационным методом, идущей от пакета для смеси, находится в положении «Выкл.».
3. Повесьте пакет со смесью для введения гравитационным методом на инфузионную стойку, откройте крышку и влейте в него назначенное количество смеси (см. рис. 2). Плотно закройте крышку и снимите пластиковый колпачок с конца трубки системы (см. рис. 3).
4. Установите роликовый зажим в положение «Вкл.», то есть в верхнее положение, и заполните систему смесью (смесь должна дойти до конца трубки), а затем закройте роликовый зажим снова.
5. Соедините конец трубки системы для введения питания гравитационным методом, идущей от пакета со смесью, с зондом и медленно откройте роликовый зажим, то есть он должен находиться в положении «Вкл.», или вверх.

Введение энтерального питания: гравитационный метод (только в случае чрезвычайной ситуации)

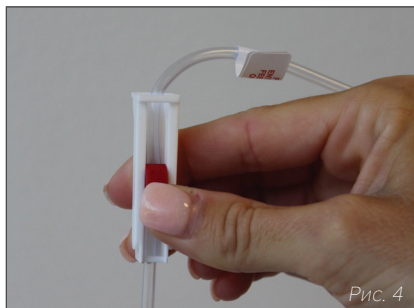

6. Скорость введения смеси можно контролировать путем регулирования положения роликового зажима, передвигая его выше или ниже (см. рис. 4).
7. После окончания сеанса питания отсоедините систему для введения питания гравитационным методом и, используя шприц, медленно промойте зонд водой в соответствии с предоставленными инструкциями.
8. Тщательно ополаскивайте систему для введения питания гравитационным методом теплой водой между кормлениями. Систему для введения питания гравитационным методом, как правило, выбрасывают после 24 часов использования.

При введении питания детям и взрослым с повышенной восприимчивостью лицам, осуществляющим уход, важно следить за тем, чтобы введение смеси гравитационным методом не происходило слишком быстро.

Со всеми вопросами
и проблемами обращайтесь
к медсестре или врачу



Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону в режиме 24/7/365.

Чтобы посмотреть видеoinструкции или ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, посетите веб-сайт optioncarehealth.com/education.

Отделения Option Care Health аккредитованы Комиссией по аккредитации медицинских учреждений (Accreditation Commission for Health Care, ACHC). Номера организаций по медицинскому обслуживанию на дому (Home Health Agencies, ННА) можно посмотреть на веб-сайте optioncarehealth.com.

© Option Care Health, Inc. 2021 г. Все права защищены. 200CH11024