

Введение энтерального питания: насос Joey

Дополнительную информацию см. в буклете «Руководство по энтеральному питанию для пациентов».

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций. Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, медсестры, фармацевта или диетолога в отношении вашей терапии.

Данные инструкции описывают основные действия по введению энтерального питания. Более подробные инструкции см. в кратком справочном руководстве по использованию насоса Joey.



Рис. 1



Рис. 2

С чего начать

- Подготовьте чистое рабочее место.
- Тщательно вымойте руки теплой водой и мылом в течение **20 секунд** (если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

1 | Подготовка к зондовому питанию в домашних условиях

- А. Подготовьте смесь и принадлежности, разместив их на чистом рабочем месте (см. рис. 1).
- В. Проверьте срок годности на картонной коробке со смесью и убедитесь, что название смеси совпадает с тем, что назначил ваш врач. Перед открытием протрите коробку сверху чистой тканевой салфеткой и хорошо встряхните.

Открытые картонные коробки со смесью следует немедленно закрыть и убрать в холодильник.

Продукт не должен находиться в пакете в течение более чем 12 часов (если используется разведенный порошок, он не должен находиться в пакете в течение более чем 4 часов).

Используйте или выбросьте открытую смесь в течение 24 часов или действуйте в соответствии с рекомендациями производителя.

- С. Перед началом введения постелите полотенце на колени, так как смесь может пролиться во время введения.
- Д. Сядьте прямо или приподнимите изголовье вашей кровати не менее чем на 30–45 градусов. **НЕ** лежите ровно на спине во время введения питания и по крайней мере в течение одного часа после этого.

2 | Введение питания через зонд

- А. Удерживая пакет для смеси в вертикальном положении, откройте крышку и влейте в него назначенное количество смеси. После этого надежно закройте пакет крышкой (см. рис. 2).
- В. Включите насос, нажав на кнопку питания в нижнем правом углу (см. рис. 3).
- С. Для выполнения необходимого действия нажмите кнопку выбора соответствующего меню ► рядом с «KEEP SETTINGS» («СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ») или ► «CLEAR SETTINGS» («СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ»).

Для выполнения ежедневно повторяющихся действий выберите «KEEP SETTINGS» («СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ»).

- Д. Заправьте систему, идущую от пакета со смесью, в соответствии с диаграммой под крышку насоса (см. рис. 4). Закройте крышку и снимите пластиковый колпачок с конца системы (см. рис. 5).



Введение энтерального питания: насос Joey



Рис. 3

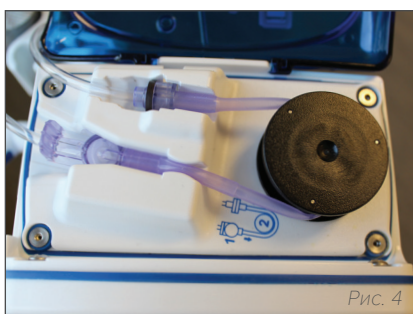


Рис. 4

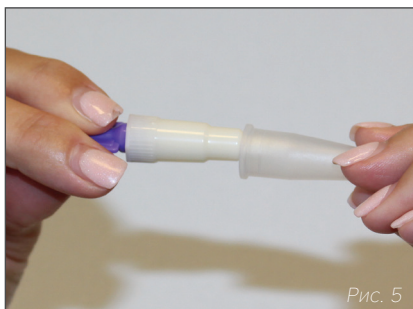


Рис. 5



Рис. 6

- E.** Нажмите ► **«PRIME PUMP» («ЗАПОЛНИТЬ НАСОС»)**, чтобы получить доступ к меню заполнения насоса, а затем нажмите ► **«AUTO PRIME» («АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ»)**, чтобы система заполнялась автоматически.
- F.** Нажмите ► **«HOLD TO PRIME FEED» («УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ СМЕСЬЮ»)**, чтобы вручную заполнить систему (смесь должна дойти до конца трубки), а затем нажмите ► **«DONE» («ГОТОВО»)**.
- G.** Выберите ► **«ADJUST FEED» («РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ»)**, затем ► **«FEED RATE» («СКОРОСТЬ ПОДАЧИ»)**. Далее используйте кнопки слева, чтобы задать необходимую скорость. После настройки скорости выберите ► **«ENTER» («ВВОД»)**.
- H.** Выберите ► **«FEED VTVD» («ОБЪЕМ ПОДАЧИ СМЕСИ»)** и используйте кнопки слева, чтобы задать необходимый объем подачи. После настройки объема выберите ► **«ENTER» («ВВОД»)**.
- I.** Если у вашего зонда есть зажим, убедитесь, что он находится в закрытом положении, прежде чем открывать заглушку на его конце. Если у вашего зонда нет зажима, перед снятием заглушки на его конце пережмите трубку пальцами.
- J.** Снимите колпачок с зонда, откройте зажим и медленно промойте зонд водой (см. рис. 6).
- K.** Соедините конец трубки, идущей от пакета со смесью, с зондом. Выберите ► **«RUN» («ПУСК»)**.
- L.** После окончания сеанса питания отсоедините трубку, идущую от пакета со смесью, и медленно промойте зонд водой, используя шприц.
- M.** Закройте конец зонда. Закройте зажим.
- N.** Нажмите кнопку питания, чтобы выключить насос.
- O.** Тщательно ополаскивайте пакет для смеси теплой водой между кормлениями.

Один пакет для смеси рассчитан на использование в течение 24 часов.

График кормления

Название(-я) смеси(-ей):	
Целевое количество/день:	
Целевая скорость:	
Интервал/частота:	
Дополнительные примечания:	

Введение энтерального питания: насос Joey

Промывание водой

Промывание водой необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания и закупорки системы.

- Для медленного промывания системы слегка теплой водой используйте шприц объемом 60 мл.
- Промывайте _____ мл воды до и _____ мл после кормления.
- Ежедневно дополнительно промывайте _____ мл воды.

Никогда не прикладывайте избыточную силу при промывании системы.

Советы для успешного питания

- **НЕ** вводите питание в случае расстройства желудка или рвоты.
- Если появилось неприятное чувство распирания, снизьте скорость или прекратите введение питания на один час.
- **НЕ** вводите в систему ничего, кроме смеси или воды, если ваш поставщик медицинских услуг не дал иных четких указаний.

Со всеми вопросами
и проблемами обращайтесь
к медсестре или врачу



Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону в режиме 24/7/365.

Чтобы посмотреть видеоруководства или ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, посетите веб-сайт optioncarehealth.com/education.

Отделения Option Care Health аккредитованы Комиссией по аккредитации медицинских учреждений (Accreditation Commission for Health Care, ACHC). Номера организаций по медицинскому обслуживанию на дому (Home Health Agencies, ННА) можно посмотреть на веб-сайте optioncarehealth.com.

© Option Care Health, Inc. 2021 г. Все права защищены. 200CH11026