


Administración de nutrición enteral Bomba Omni

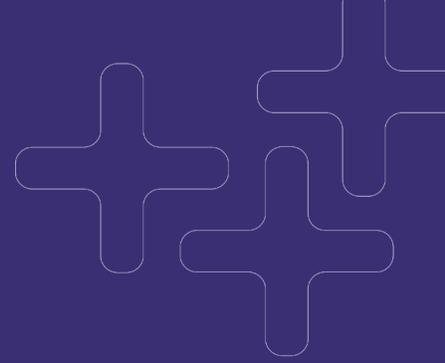

Esta información no está destinada a servir como sustituto del asesoramiento profesional. Por lo tanto, siga las recomendaciones de su médico, nutricionista, personal de enfermería o farmacéutico.

Para empezar

Use un área de trabajo limpia. Lávese bien las manos con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol. Séquese las manos con una toalla limpia.

1. Cómo preparar la alimentación por sonda en casa

- Reúna la fórmula y los suministros, y colóquelos en el área de trabajo limpia. **(Figura 1)**
- Verifique la fecha de vencimiento en la caja de la fórmula y asegúrese de que el nombre de la fórmula coincida con el de su prescripción. Limpie la parte superior con un paño limpio y agite bien antes de abrir.



Las cajas abiertas de fórmula se deben tapar y refrigerar de inmediato. El producto no debe permanecer en la bolsa de alimentación durante más de 12 horas (si se usa un polvo reconstituido, no debe permanecer en la bolsa durante más de 4 horas). Use o deseche cualquier fórmula abierta en un plazo de 24 horas o según las recomendaciones del fabricante.

- Coloque una toalla sobre su regazo, ya que la fórmula se puede derramar durante la administración.
- Siéntese en una posición erguida o eleve la cabecera de su cama al menos entre 30 y 45 grados. **NO** permanezca acostado durante la alimentación ni durante al menos una hora después

Su equipo de Option Care Health está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para ayudarlo.


2. Administer tube feeding

- A. Mantenga la bolsa de alimentación en posición vertical, abra la tapa y llénela con la cantidad indicada de fórmula; después, cierre la tapa de forma segura. *(Figura 2)*
- B. Encienda la bomba presionando la tecla de encendido en la parte inferior del frente de la misma. *(Figura 3)*
- C. Presione el botón de selección de menú correspondiente a ► **'KEEP SETTINGS'** o ► **'CLEAR SETTINGS'** para realizar la acción deseada.

Seleccione 'KEEP SETTINGS' para el funcionamiento diario.

- D. Cargue el cartucho de alimentación en la bomba siguiendo las instrucciones animadas que aparecen en la pantalla. Escuchará el sonido de un clic cuando el cartucho se haya instalado correctamente. *(Figura 4)* La pantalla de 'Set Loaded' confirmará que el cartucho de alimentación se ha cargado correctamente. Retire la cubierta de plástico transparente del extremo de la sonda. *(Figura 5)*
- E. Cuando esté listo para la preparación, presione ► **'PRIME'** y luego ► **'AUTO PRIME'** para empezar la preparación. *(Figura 6)*
- F. Mantenga presionada la tecla ► **'PRIME FEED'** para desplazar manualmente la fórmula hacia el extremo de la sonda y luego presione ► **'DONE'**.
- G. Presione ► **'ADJUST RATE'** y use los botones + o - para aumentar o disminuir la velocidad de alimentación. Seleccione ► **'OK'** cuando haya ajustado la velocidad. *(Figura 4)*
- H. Si la sonda de alimentación tiene una abrazadera, asegúrese de que esté en posición cerrada antes de abrir el extremo de la sonda de alimentación. Si la sonda no tiene una abrazadera, pellízquela antes de abrir el extremo.
- I. Abra la tapa de la sonda de alimentación, libere la abrazadera y enjuague lentamente la sonda con agua. *(Figura 7)*
- J. Conecte el extremo de la bolsa de alimentación preparada a la sonda de alimentación. Presione ► **'START'** para comenzar el proceso de alimentación.
- K. Una vez se complete el proceso de alimentación, desconecte la bolsa de alimentación y use la jeringa para enjuagar lentamente la sonda con agua.
- L. Cierre el extremo de la sonda de alimentación y sujételo con la abrazadera.
- M. Presione el botón de encendido para apagar la bomba.
- N. Enjuague cuidadosamente la bolsa de alimentación con agua tibia después de cada uso.

Use una bolsa de alimentación cada 24 horas.

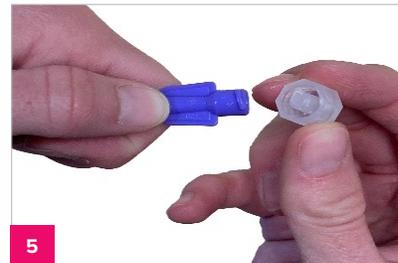

Cronograma de alimentación

Nombre(s) de la fórmula:	
Cantidad meta/día	
Velocidad meta:	
Intervalo/frecuencia:	
Notas adicionales:	

Cómo administrar los enjuagues con agua

Los enjuagues con agua se administran para proporcionar una hidratación adecuada y para prevenir obstrucciones en la sonda.

- Use una jeringa de 60 ml para enjuagar lentamente la sonda de alimentación con agua tibia
- Enjuague con _____ ml de agua antes y _____ ml después de la alimentación
- Enjuague con _____ ml de agua adicionales cada día

No aplique mucha fuerza cuando enjuague la sonda.

Consejos para una alimentación correcta

- **NO** use la sonda de alimentación si tiene malestar estomacal o vómito.
- Si desarrolla una sensación incómoda de saciedad, ralentice la alimentación o espere una hora antes de continuar.
- **NO** ponga nada más que la fórmula o agua en la sonda, a menos que su proveedor de atención médica se lo indique específicamente.

Su equipo de Option Care Health está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para ayudarlo.



Escanee el código QR para ver las instrucciones en video y acceder a recursos educativos adicionales o visite optioncarehealth.com/education

